

Functional Form

功能性

简单的排列，便可轻松达到稳定的咬合效果。

与平均值咬合器的运动轨迹相适应的前牙和后牙的引导面，使咬合力便于集中在正中咬合位的平缓的牙尖倾斜，以及留有余裕的嵌合关系，在这三者的共同作用下，得以实现流畅的离心运动。

* 有时根据病例的具体情况，会进行若干必要的调整。

POINT1

自然的形态

模仿天然牙齿增龄性变化，做预磨损处理




POINT2

平缓的牙尖倾斜和深咬合面裂沟

半解剖式人工牙，牙尖斜度 20°


深点隙裂沟，即使调颌后，窝沟仍然存在，保证了咀嚼效率，减轻颞下颌关节压力

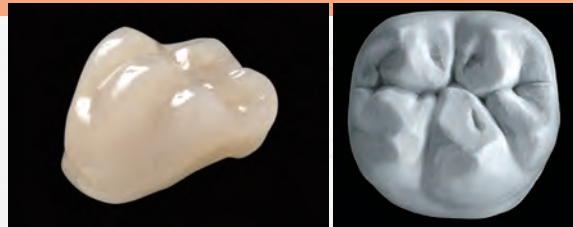

POINT3


留有余裕的嵌合关系

留有余裕的嵌合关系，咬合空间充足

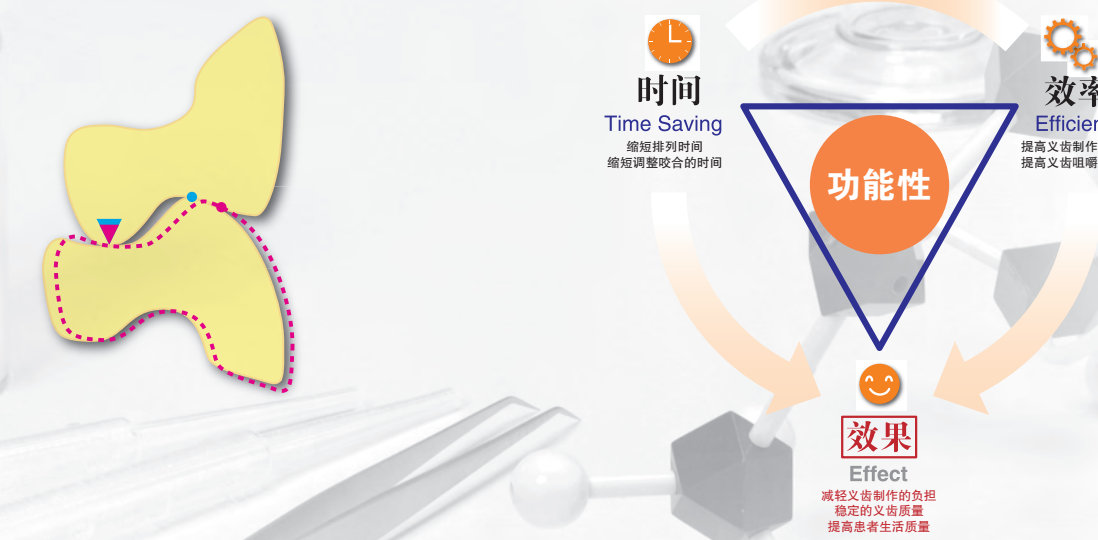

Q³ : Quick Quality Quartet
Q pack TIME SAVING

高质量快速后牙一步排牙法

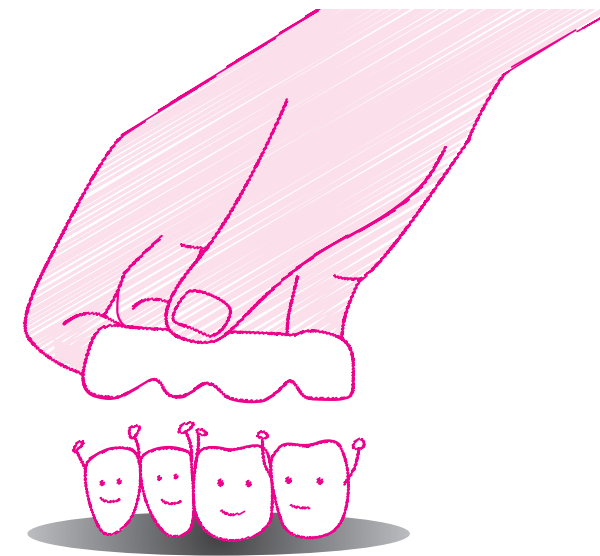

Q3 包装唯真牙 SA 快速排牙示例



包装 - 规格



VERACIA SA 前牙 16 排 / 盒

	上牙	下牙
形态	S4, S5, S6, ST4, ST5, ST6, O4, O5, O6	MA4, MA5, MA6, MA7
颜色	A1, A2, A3, A3.5	



VERACIA SA 后牙 12 排 / 盒

上牙 / 下牙
S28, S30, S32
A2, A3, A3.5



VERACIA SA 后牙 Q-PACK 包装 12 排 / 盒

【颜色】2 色 (A2, A3)

【形态】上下颌各 3 种 (S28, S30, S32)

欲了解更多信息
请扫描下方二维码



贡献于世界齿科医疗的

株式会社 松風

本社：〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11・日本

松風齿科器材贸易(上海)有限公司：上海市松江区佘山工业区吉业路645号 (201602) 电话：(8621) 57796980 传真：(57796981) E-mail：shanghai@shofu.com.cn

http://www.shofu.com.cn

Veracia SA 唯真牙

生物功能性半解剖式合成树脂牙



技师：更短的排列和调整咬合时间
患者：更好的义齿品质和咀嚼效率



Technology

新材料技术 MF-H

适合长期使用的新材料：MF-H 复合材料

MF-H 复合材料含有混合形态的微填料（有机复合充填物），通过这一技术，可以获得能够长期使用的，具有优秀耐磨性和持久性的义齿。

POINT1 MF-H 材料由以下三种成分构成



1) 优秀物理特性的有机复合填料

树脂和硅微粒混合而成的微填料，具有优秀的耐磨性和硬度，挠曲强度。




2) 具有强韧性和审美性的有机填料

含有此填料的牙釉质层可以与基托树脂紧密结合，抑制由唇侧牙颈部的微渗漏造成的变色，保持美观的牙色。同时该材料含有丙烯酸树脂成分，因此兼有丙烯酸树脂特有的强韧性效果。



3) 具备优秀抗染色性能的特殊基质树脂



除了良好的物理特性外，与以往的硬质树脂牙相比，抗染色性也大大提高。

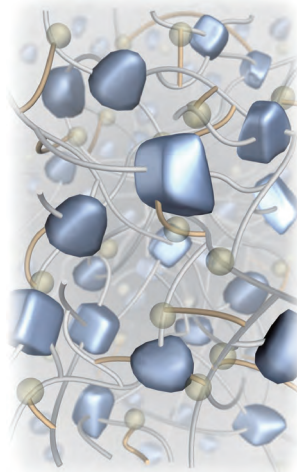

POINT2

牙本质层也采用硬质树脂（MF-H 复合材料）

口腔内长期使用的牙本质层即使露出，也可保持非常高的耐磨性。

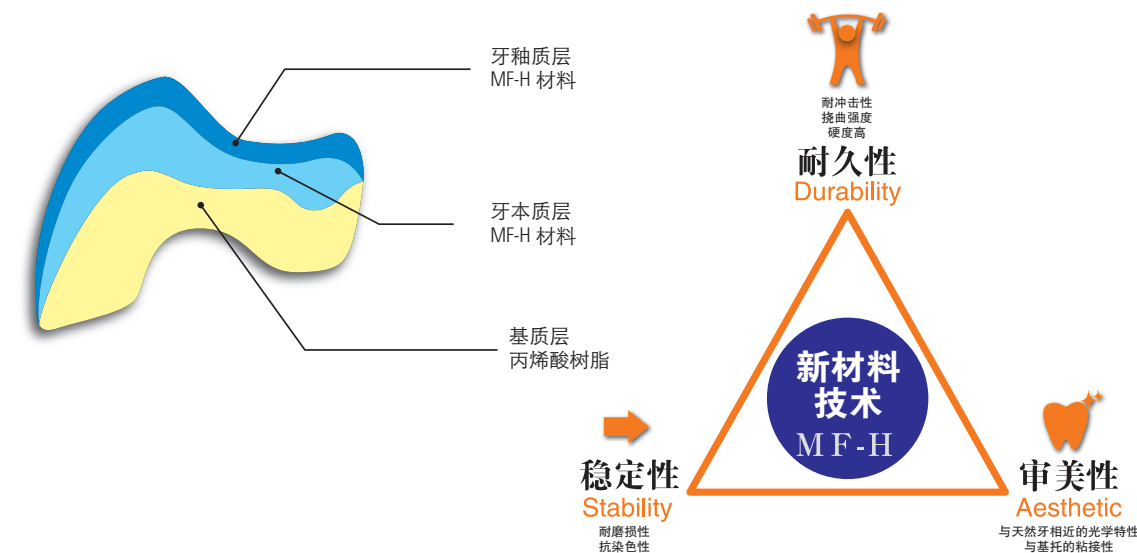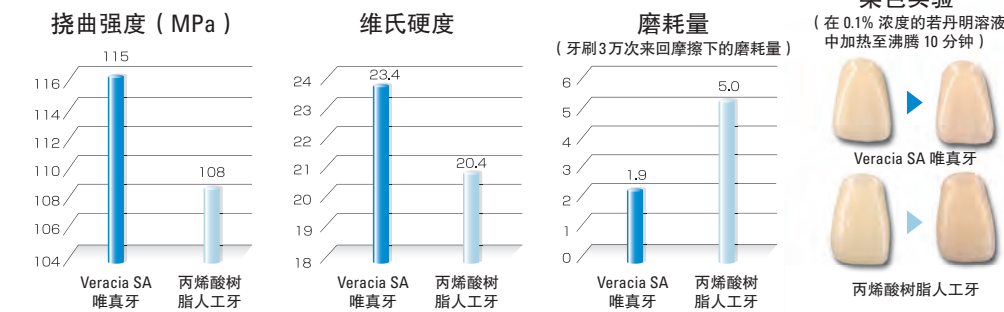

S: 方形



ST: 混合型



O: 卵圆形



MA: 磨耗型




S: 短种



前牙的选择基准 (参考)

垂直覆殆 <Over Bite> 1mm	S4 ST4 O4	S5 ST5 O5	S6 ST6 O6
水平覆盖 <Over Jet> 3-4mm	MA4	MA5	MA6
垂直覆殆 <Over Bite> 1mm	S4 ST4 O4	S5 ST5 O5	S6 ST6 O6
水平覆盖 <Over Jet> 0-1mm	MA5	MA6	MA7

前牙尺寸读法 (mm)

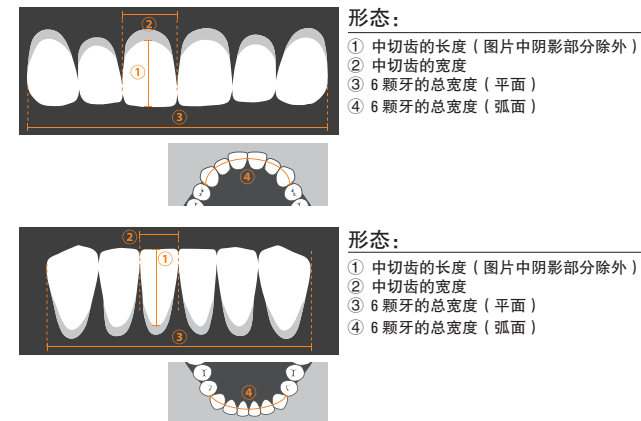

后牙尺寸读法 (mm)

