


LONG LASTING



CY5 - No. 70: 表面调整
由于切削性能优异,有效的调整了牙冠表面形态

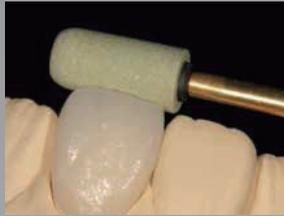

KN7 - No. 10: 内冠调整
调整瓷层厚度及全瓷内冠



TC4 - No. 20: 细节完成
调整出理想的轴嵴及咬合面



用Shofu白色调整石来调整绿色金刚石磨头形态

Dura - Green® DIA


玻化金刚石打磨材



独有专用打磨头形态调整石,可对钝化的打磨头边缘形态进行修整。

都拉玻化金刚石打磨材,人造金刚石颗粒,采用了高温烧结玻璃作为粘合剂,适合高速高温超硬材料(氧化锆/二硅酸锂玻璃等)的形态修整。普通的打磨材传统使用树脂作为粘合剂,而在打磨超硬材料时表面剧烈发热,局部温度高达600~800°C,粘合树脂软化造成磨料颗粒脱落。松风创造性的采用高温玻璃烧结工艺形成粘合剂,大大延长了磨头的使用寿命。人造金刚石具有比传统金刚石更好的切割效率。

	普通 绿色砂石	都拉 玻化金刚石
磨料	碳化硅颗粒	金刚石颗粒
结合剂	硅橡胶树脂	玻璃
工艺	常温聚合	高温烧结
切削效率	比氧化铝好	3倍于碳化硅

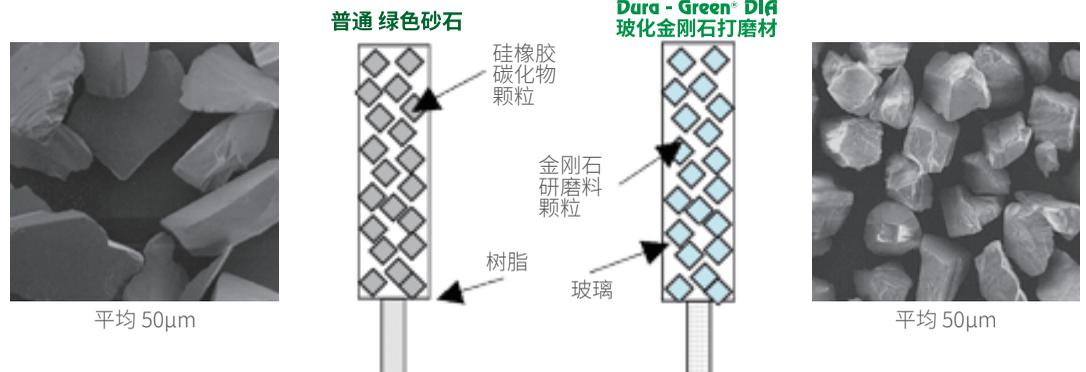

绿色金刚石磨头适用于: 氧化锆、二硅酸锂、及硬质合金

转速: 最大允许旋转速度30,000 min,
灭菌方法: 高温高压灭菌134°C下3分钟, 或121°C下30分钟

型号	CY5	FL3	IC5	KN7	RD2	RD3	TC2	TC4	WH6	
形态										
HP(2pk*/3pk) (技工手机用)	0156*	0158	0162	0154*	-	0159	0161	0155	0157*	0153
订货编码	DHP70	DHP28	DHP42	DHP10	-	DHP29	DHP43	DHP20	DHP11	混装DHP10+20+70
包装	2支/盒	3支/盒	3支/盒	2支/盒	-	3支/盒	3支/盒	3支/盒	2支/盒	混合3支装
CA (3pk) 临床手机用	-	0163	-	-	-	0164	0165	-	-	0166
订货编码	-	DCA28	-	-	-	DCA29	DCA43	-	-	混装DCA28+29+43
包装	-	3支/盒	-	-	-	3支/盒	3支/盒	-	-	混合3支装
FG (3pk) 高速涡轮机用	-	0168	-	-	0167	-	-	-	-	
订货编码	-	DFG28	-	-	DFG25	-	-	-	-	
包装	-	3支/盒	-	-	3支/盒	-	-	-	-	

价格: 120元/2支装, 160元/3支装



贡献于世界齿科医疗的

株式会社 松風


本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11・日本

松風齿科器材贸易(上海)有限公司: 上海市松江区余山工业区吉业路645号 (201602) 电话: (8621) 57796980 传真: (57796981) E-mail: shanghai@shofu.com.cn

<http://www.shofu.com.cn>

Dura - Green® DIA

玻化金刚石打磨材

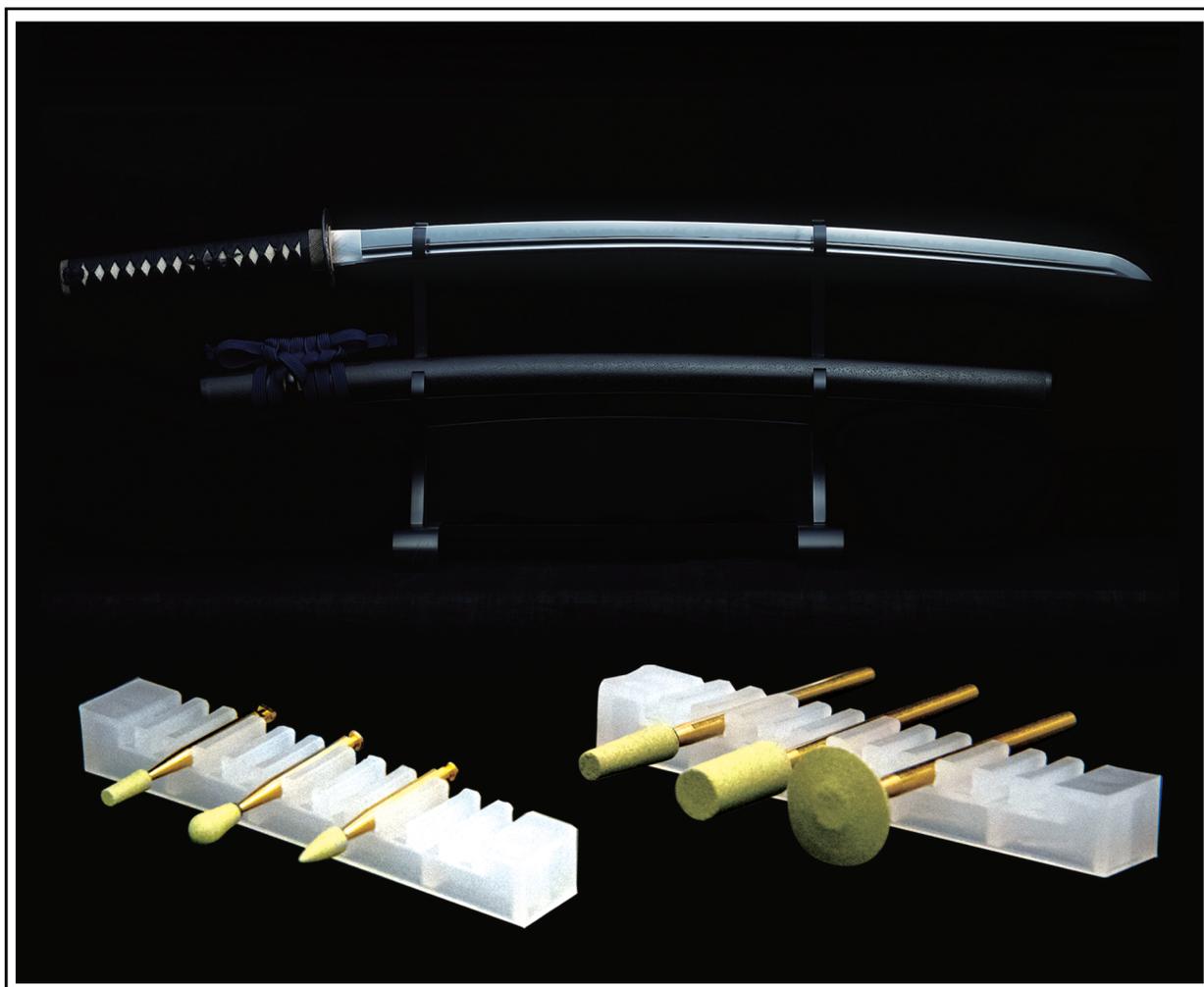

全瓷、全锆的高效打磨

