

shenp^z

FOCUS 4010 齿科专业烤瓷炉



精确控制和可靠耐用的完美统一

FOCUS 4010 | FOCUS HT 4010

Small in size. Big on performance.






FOCUS 4010 | FOCUS HT 4010

Small in size. Big on performance.

如果您的空间有限，或者您正在为实现高质量烧结寻找解决方案，那么Shen-Paz陶瓷烧结炉FOCUS 4010可以提供理想而且十分可靠的解决方案。

FOCUS 4010尺寸小，但是作用大。它十分便于移动，而且可以持续多年保持精确和可靠的性能。

- ◆ 直观的全彩数字屏显示循环进度和循环数据。
- ◆ 精确真空校准—这一功能可准确维持烤瓷件的透明性和美学效果，避免烤瓷件上的过高亮度或灰暗。
- ◆ 完全程控—200个程序（198个程控模式+夜间模式和净化循环），可以准确地设置参数，进而准确达到所需的结果。
- ◆ 使用USB连接可简单地上传程序。
- ◆ 3个可预先程序化的冷却步骤实现对整个冷却流程的控制。
- ◆ 自动夜间模式将自动切换为夜间模式温度，150°C（122°F）。早上上班时工作已经准备就绪！这个模式可以防止水分在炉胆内累积。
- ◆ 可靠、光滑和安静的举升机制。

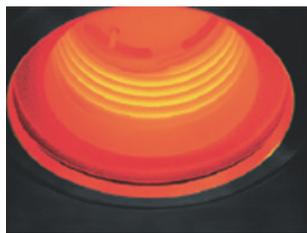

石英管炉胆

25年前,ShenPaz首次发明了石英管Kanthal炉膛在牙科烤瓷炉中的应用，该技术所形成的产品已成为市场上最可靠的烤炉部件之一。石英管炉膛提供均匀的热量辐射，在颈部、主体和切端区域实现理想的烧结结果和精确的温度

- ◆ 高速冷却—可快速开始下个循环
- ◆ 专门针对可靠性重新设计的高温炉丝，烧结使用寿命超过了3000小时烧结温度高达1180°C（2156°F），加热速度为10-120°C

两个型号的烤瓷炉可选：

FOCUS 4010，用于牙科陶瓷的烧结。

FOCUS 4010 HT，用于烧结循环达到4.5小时的氧化铝基陶瓷。可为氧化铝（InCeram、opCeram和TurkCeram）启用真空渗透程序。

技术规格

	FOCUS 4010	FOCUS 4010 HT	可用电源	FOCUS 4010	FOCUS 4010 HT
最大温度	1200°C	1200°C	100v50/60Hz, 15aA	√	√
最大烧结温度	1180°C	1180°C	115v 50/60Hz, 15 A	√	√
升温速率*	1 to 120°C	1 to 120°C	230v 50/60Hz, 8 A	√	√
程序	200	185 / 15	1年质保	√	√
声音信号	√	√			
重量	13.5 Kg	13.5 Kg			
宽x高x深（厘米）	23X 57 X 24	23X 57 X 24			
USB接口	√	√			
柱形烧结室	Ø 95mm X 65mm	Ø 95mm X 65mm			

shenpaz
electr^otherm group

ShenPaz Dental Ltd.
5 HaTaasia Street
Ramat Gabriel Ind. Park, Migdal HaEmek 23101, Israel
Tel: +972 (0)3 562 0428
Fax: +972 (0)4 6042040
Email: ShenPaz@ShenPaz.com
www.ShenPaz.com

包装内容

- ◆ 1只烤瓷炉
- ◆ 1根控制连接电源线
- ◆ 1只陶瓷台
- ◆ 1对烤瓷炉镊子
- ◆ 1本操作手册
- ◆ 1只升降机插销
- ◆ 1只备用保险丝
- ◆ 1只边台

安全性信息

- ◆ FOCUS 4010和FOCUS 4010 HT符合下列标准：
- ◆ IEC 61010-1-2001
- ◆ EN 61010-1-2001
- ◆ IEC 61010-2-010-2003

无线电保护/电磁相容性

- ◆ 经过了EMC测试



贡献于世界牙科医疗的

株式会社 松風

本社：〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・日本

松風牙科器材貿易(上海)有限公司：上海市松江区余山工业区吉业路645号 (201602)电话：(8621)57796980 传真：(57796981) E-mail: shanghai@shofu.com.cn

<http://www.shofu.com.cn>