


松风光聚合设备

Solidilite V & Sublite V

强大高效的光聚合

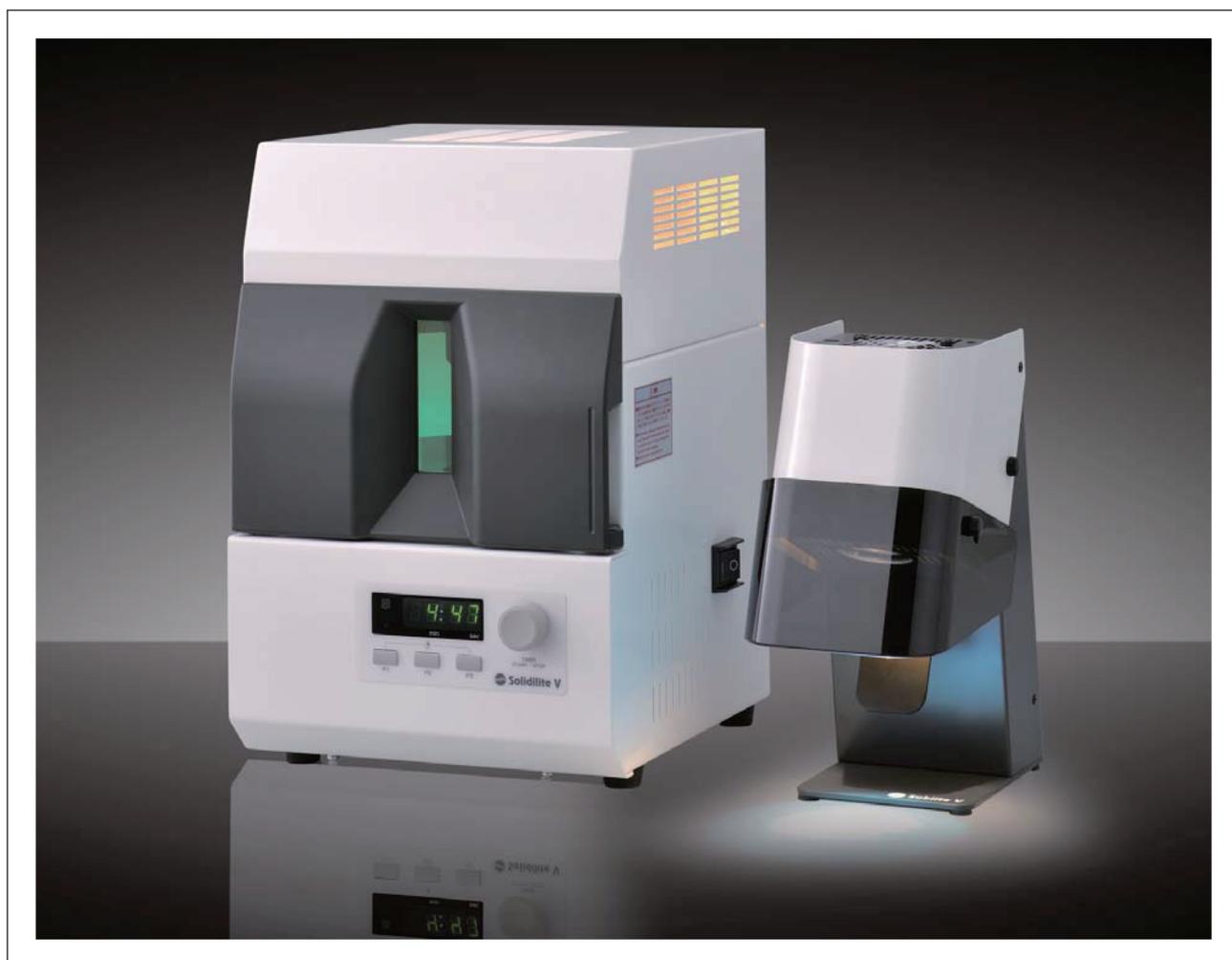

POWERFUL . COMPACT . SIMPLE . EFFICIENT


松风的聚合瓷系统是专门针对技工树脂（Ceramage和Solidex）设计的，结构简单紧凑、使用方便，强大的光输出功率极大提高了聚合强度和速度。




Solidilite V

600W的光输出功率能够在短时间内完成聚合操作并达到极高的聚合强度。

光波在400-550纳米的紧凑、高效照射

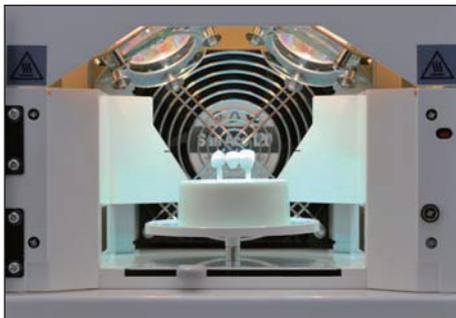

4个150W的卤素灯泡，400-550纳米的较宽光谱范围，确保有效固化。可调节高度的旋转盘可以使光源无阴影照射。

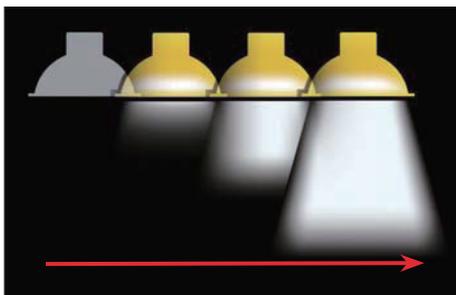

缓慢启动延长灯泡寿命

2-4秒的慢启动光照输出可以大幅度提高卤素灯泡的使用寿命。

。


个性化的编程

3个固定光照程序可简单操作，并可用调整旋钮来微增加/减少固化时间。

P1 - 1 minute

P2 - 3 minutes

P3 - 5 minutes

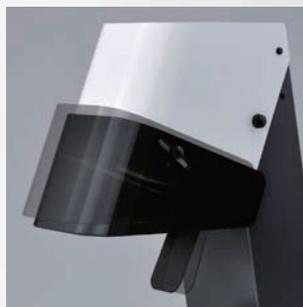

Sublite V 省时及专业的预固化 各种设定


150W的光固化小灯操作便捷、大大提升了操作效率。



技术参数


Solidilite V

- 尺寸: W 230mm*D 252mm *H354mm
- 重量: 约9.5kg
- 额定电源电压: 200V-240V, 50/60Hz
- 保险丝: 2*3.15A 间隔
- 灯泡: 4 JCR 110V 150W 卤素灯泡
- 波长: 400-550nm

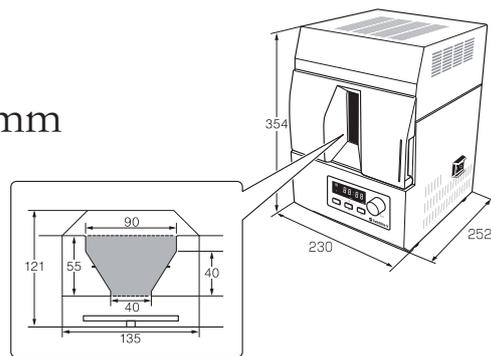

Sublite V

- 尺寸: W 112mm*D 210mm * H 252mm
- 重量: 约2.5kg
- 额定电源电压: 200V-240V, 50/60Hz
- 保险丝: 2*1.6A 间隔
- 灯泡: 1 JCR 110V 150W 卤素灯泡
- 波长: 400-550nm

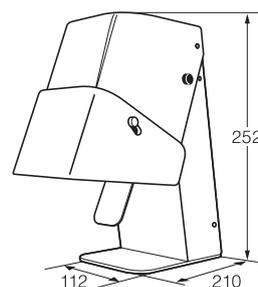

配件

支架盘

固定物体，可以固定单冠及桥体。



支架钉

5个种类每种3个钉

可随意成型/ 前牙尖头型/ 前牙扁头型

前磨牙卵圆形/ 磨牙圆型

