


ENDURA™的特性

FEATURES OF ENDURA™ TEETH

1 高硬度，耐磨耗

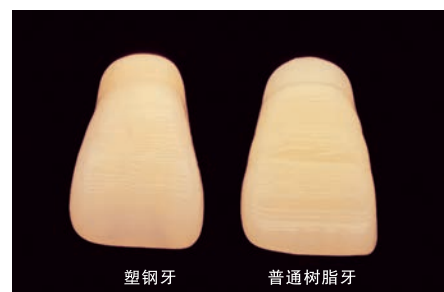

■ 磨耗实验（模拟刷牙60,000次来回）

高强度的前后牙牙釉质层是由一种专利技术制造的超微填料树脂制成，决定了它耐受机械磨耗的特性。ENDURA™塑钢牙耐磨耗性能高于普通复合树脂牙6倍以上。前牙奴氏硬度30.2kg/mm²，后牙27.8 kg/mm²。

2 高韧性

后牙的牙釉质层及牙本质层的强度是通过平衡抗弯曲强度和抗压强度得到加强，所以可以获得足够的强度同时又有足够的韧性，克服了硬度与脆性之间的矛盾。

3 形态研究，为了东方人

ENDURA™ 塑钢牙前牙完美的形态是松风多年来潜心研究5040种东方人牙体形态的结晶，丰富的适合东方人的牙体形态能够满足临床的各种需要。后牙以点接触恢复咬颌关系，对牙槽嵴的损害小。



4 模拟自然牙，以假乱真

ENDURA™塑钢牙具有独有的模拟自然牙的三层结构，与自然牙一样的OPAL乳光效果，仿佛自然牙重生。同时基底层、牙本质层和牙釉质层都有足够的厚度允许研磨，且磨改后不会失去原有的物理结构和特性。




■ Opal 乳光效果

5 丰富颜色，自由选择

ENDURA™ 塑钢牙前牙有16个色调，后牙有9个色调，与各种自然牙色完美匹配。

6 适合多种牙槽嵴形态的殆形

ENDURA™塑钢牙后牙的设计完全考虑了临床无牙颌的牙槽嵴丰满度的变化要求，特设计两种殆型：半解剖式牙，牙尖斜度20度；非解剖式牙，牙尖斜度0度。

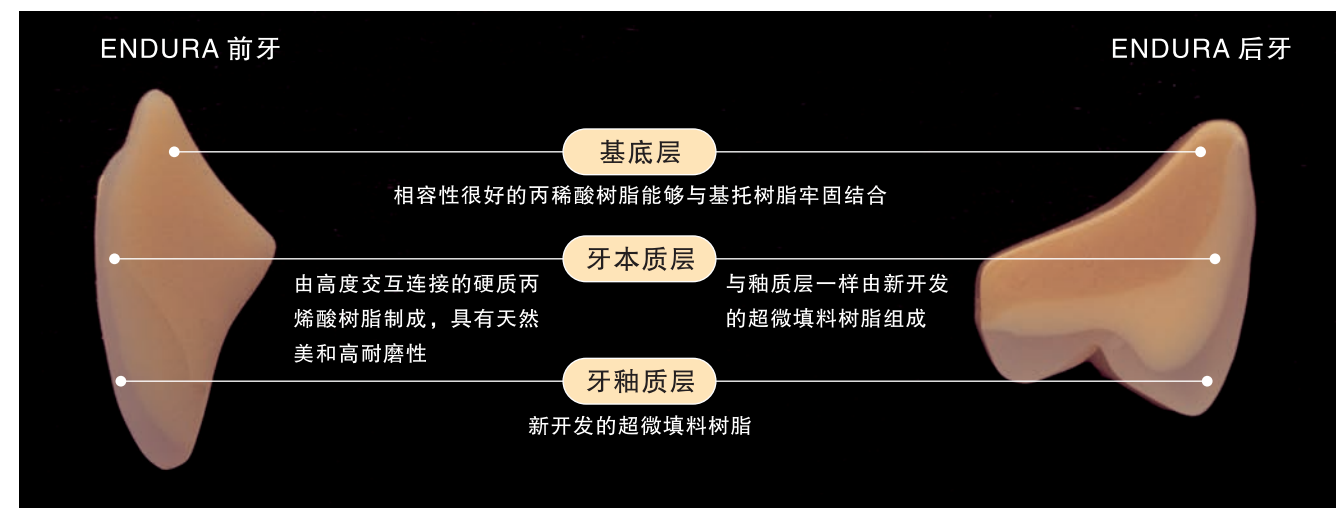

ENDURA™ 塑钢牙

最适合东方人的义齿



高硬度，耐磨耗
不是瓷牙，胜似瓷牙



贡献于世界齿科医疗的

株式会社 松風

本社：〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・日本

<http://www.shofu.com.cn>

松風齿科器材贸易（上海）有限公司：上海市松江区余山镇工业区吉业路645号（201602） 电话：（8621）57796980 传真：（57796981） E-mail：shanghai@shofu.com.cn

前牙图表



HS3 $\frac{10.0 \ 7.5 \ 41.0 \ 46.5}{9.0 \ 33.0 \ 36.5}$



HS4 $\frac{10.5 \ 8.0 \ 44.5 \ 50.0}{9.5 \ 34.5 \ 38.0}$



HS5 $\frac{11.0 \ 8.5 \ 47.5 \ 53.0}{10.0 \ 37.0 \ 41.0}$



HS6 $\frac{12.0 \ 9.0 \ 50.0 \ 56.5}{10.5 \ 40.0 \ 44.0}$

方型



HT3 $\frac{9.5 \ 7.5 \ 39.0 \ 43.0}{8.5 \ 31.5 \ 34.5}$



HT4 $\frac{10.5 \ 8.0 \ 41.5 \ 46.0}{9.0 \ 32.5 \ 36.5}$



HT5 $\frac{11.0 \ 8.5 \ 44.5 \ 50.0}{10.0 \ 34.5 \ 38.0}$



HT6 $\frac{11.5 \ 9.0 \ 47.0 \ 55.0}{10.5 \ 37.0 \ 41.0}$

尖型



HO3 $\frac{9.5 \ 7.5 \ 40.5 \ 45.5}{8.5 \ 30.5 \ 33.5}$



HO4 $\frac{10.0 \ 8.0 \ 42.0 \ 47.0}{9.0 \ 32.5 \ 36.0}$



HO5 $\frac{10.5 \ 8.5 \ 45.0 \ 51.5}{9.5 \ 35.0 \ 38.5}$



HO6 $\frac{11.0 \ 9.0 \ 47.5 \ 54.5}{10.5 \ 37.0 \ 40.5}$

卵圆型



HSS3 $\frac{9.0 \ 7.5 \ 39.5 \ 45.0}{8.0 \ 31.5 \ 36.0}$



HSS4 $\frac{9.5 \ 8.0 \ 42.0 \ 48.0}{8.5 \ 33.0 \ 38.0}$



HSS5 $\frac{10.0 \ 8.5 \ 44.0 \ 50.0}{9.0 \ 35.5 \ 40.5}$



HSS6 $\frac{11.0 \ 9.0 \ 47.5 \ 64.0}{10.0 \ 38.0 \ 43.5}$

短方型



HC3 $\frac{9.5 \ 7.5 \ 40.0 \ 45.5}{8.5 \ 33.0 \ 37.0}$



HC4 $\frac{10.5 \ 8.0 \ 43.5 \ 49.5}{9.0 \ 34.5 \ 38.5}$



HC5 $\frac{11.0 \ 8.5 \ 45.5 \ 51.5}{9.5 \ 36.0 \ 41.0}$



HC6 $\frac{11.5 \ 9.0 \ 48.0 \ 54.5}{10.0 \ 38.5 \ 43.5}$

混合型



松风塑钢牙单粒包装
(30粒/盒)



新品上市
NEW
ARRIVAL

型号：

	颜色	型号	位置
前牙	A2/A3	HSS3 HC3 HSS4 HC4 HSS5 HC5	左上1，右上1， 左下1，右下1
前牙	A2/A3	HSS4 HC4	左上2，右上2
后牙	A2/A3	M28 M30 M32	左上4，5，6，7 左下4，5，6，7 右上4，5，6，7 右下4，5，6，7

解剖角度

尖牙角度	20 度	失状腭道斜度	15 度
失状腭道角度	25 度	侧向切道角度	12 度
侧道角度	15 度		

后牙图表



M28 $\frac{28.0 \ 8.5}{30.5 \ 8.5}$



M30 $\frac{30.0 \ 9.0}{32.5 \ 9.0}$



M32 $\frac{32.0 \ 10.0}{34.5 \ 10.0}$



S28 $\frac{28.0 \ 7.5}{30.5 \ 7.5}$



S30 $\frac{30.0 \ 8.0}{32.5 \ 8.0}$



S32 $\frac{32.0 \ 9.0}{34.5 \ 9.0}$

上牙 ● 4个后牙的宽度 ● 第一前磨牙的长度（不包括颈圈）
下牙 ● 4个后牙的宽度 ● 第一前磨牙的长度（不包括颈圈） mm