

Livera α

Alpha-CH 丙烯酸树脂牙






Livera α, 由于有创新的 **α-CH** 聚合物技术, 下一代力维树脂牙齿具有逼真的美感和最佳的生物相容性, 同时具有高抗冲击性和抗染色性, 超过了人们的预期。

Livera α-CH 聚合物的化学特点是高密度聚合的核心聚合物和高度交联的网状聚合物, 具有优异的机械性能。均匀包含的催化剂可保证较高的转化和更高的交联网络, 从而产生一种坚固、稳定的材料。

Livera α 化学结构

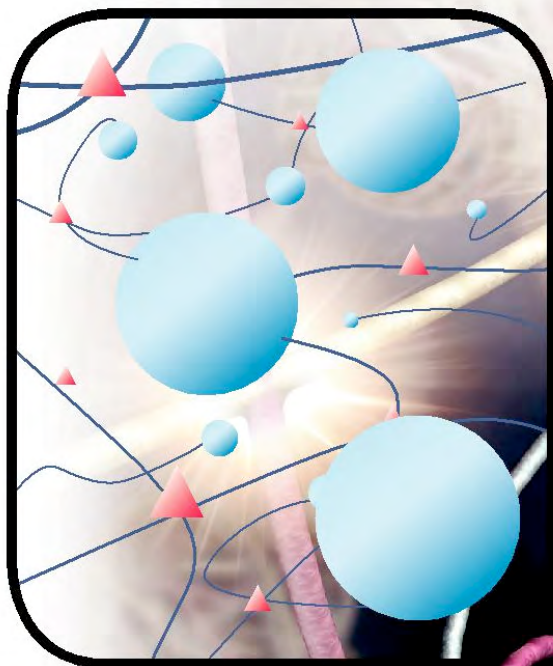

Core
Polymer
核聚合物



Network
Monomer
网状单体

后牙



Livera α
智能设计

前牙 & 后牙
与自然美学、形态和
功能相协调

天然牙的形态

Livera α 是在普通树脂牙的基础上模仿天然牙的牙齿。三种天然牙的基本形态--方形，卵圆形和尖形进一步扩展为短方形和混合形，这也是由病人的脸和牙弓形状决定的。

Livera α 为了便于选择和适合不同的患者群体，选择了 3 种流行的协调天然牙的形态。

混合形 - HC
短方形 - HSS
尖形 - HT

逼真的美学

Livera α 是用超细聚合单体制造，以模仿与 **Livera** 相同的美学效果，并在颈部区域加强浓度及切缘处具有与天然牙一致的通透度，制作出更逼真的修复体。在唇侧表面上突起的弧度和不相同的发育叶使前牙呈现出一种逼真的三维外观。

乳光效果

荧光性




Livera α



Livera α

天然牙

传统
丙烯酸树脂牙

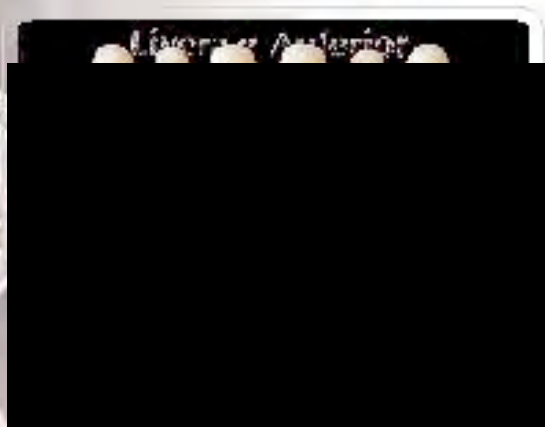


天然牙的形态与功能

Livera α 后牙设计成天然牙的解剖形态，超越普通树脂牙，更适合于制作稳定的双侧平衡牙合的咬合关系、最佳的生物相容性和美学形态。.



后牙牙合面上视图

Livera α

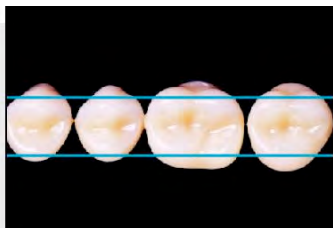

上咬牙合视图

BIOTONE®



Livera α



BIOTONE®

镜像

Livera α 是采用数字镜像对称设计，产生精确的双侧接触点。

Upper Centric Occlusion of
Livera α Posterior



Lower Centric Occlusion of
Livera α Posterior

增宽颊舌径

Livera α 颊舌宽度的设计是为了与天然牙齿紧密匹配，以确保局部义齿和全口义齿的稳定性。.

基底部具有较大的固位槽

Livera α 基底部上大的固位槽保证了与义齿基托材料更可靠的粘结和更好的固位能力。牙冠的调磨变得更容易和方便。

深且锐的排溢道

Livera α 后部有一条深而锐的排溢道，可有效咀嚼食物，促进食物排溢。即使经过正常的研磨或调整，排溢道也仍可保留。



后牙排溢道
Livera α

独特的牙齿轮廓线

Livera α 后牙设计有一个独特的轮廓线，从牙齿到义齿基托线条自然流畅，确保患者易于维护口腔卫生。



逼真与天然牙和谐的形态

Liv er a 有与 VITA 16 色相接近的经典色调，并表现出类似于天然牙齿的荧光。

Liv er a 前牙共有 3 种天然牙的形态，分为 4 种尺寸。

型号	前牙	12 种型号 (HT3, HT4, HT5, HT6, HC3, HC4, HC5, HC6, HSS3, HSS4, HSS5, HSS6)
	后牙	4 种型号 (M28, M30, M32, M34)
配色	前牙	VITA: 16 色 (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4)
	后牙	

Liv er a 的磨牙尖牙角为 33° 的全解剖

推荐尺寸组合图

(ANTERIOR – POSTERIOR)

前牙----后牙

前牙			后牙
HC3	HT3	HSS3	M28
HC4	HT4	HSS4	M28, M30
HC5	HT5	HSS5	M30, M32
HC6	HT6	HSS6	M32, M34

Livera α Anterior

Tapering

HT3

9.4
7.5
39.1
8.6
4.6
31.3



HT4

10.4
8.0
41.8
9.1
5.0
32.8



Square

Short

HSS3

9.3
7.6
39.6
8.0
4.9
31.5



HSS4

9.4
8.0
41.9
8.5
5.2
33.2



Combination

HC3

9.5
7.6
40.0
8.6
5.1
33.0



HC4


10.5
8.0
43.6
8.9
5.3
34.3



Livera α Posterior

M28

28.0
9.4
8.9
30.4
9.2
9.1

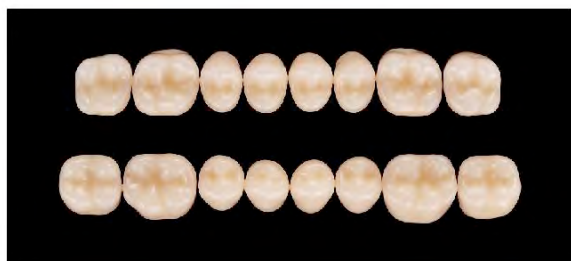

M30

30.0
10.0
9.5
32.6
9.9
9.8



前牙尺寸
[mm]

UPPER

LOWER

中切牙的长度 (不包括颈圈)
中切牙的宽度
6 个前牙的宽度 (平面)

中切牙的长度 (不包括颈圈)
中切牙的宽度
6 个前牙的宽度 (平面)

后牙尺寸
[mm]

UPPER

LOWER

4 个后牙的宽度
第一前磨牙的长度 (不包括颈圈)
第一磨牙的颊舌面宽度
4 个后牙的宽度
第一前磨牙的长度 (不包括颈圈)
第一磨牙的颊舌面宽度

模型图

HT5

10.9
8.6
44.5

9.9
5.2
34.7



HT6

11.5
9.0
47.0

10.5
5.5
37.0



HSS5

9.9
8.5
44.3

9.0
5.6
35.5



HSS6

11.0
9.0
47.5

10.0
5.8
38.0



HC5

10.9
8.5
45.6

9.6
5.6
36.3



HC6

11.5
9.0
48.0

10.0
6.0
38.5



M32

32.0
10.7
10.1

34.8
10.5
10.4



M34

34.0
11.4
10.7

37.0
11.2
11.1



上面的图片显示了上下前牙的标准组合。任何组合的上下前牙可以根据临床病例任意组合。



订单信息



Livera α Anterior
前牙 6x1 (16 板一盒)



Livera α Posterior
后牙 8x1 (12 板一盒)



Livera α 全口包装 28X1



Livera α 色板

相关产品



Province
粉剂 50gm & 250gm,
液体 100ml & 250ml



Acrylic Contouring & Finishing Kit
AcryPoint x 8, 粗砂砾 x 4 中砂砾 Grit x 2,
细砂砾 x 2, Robot Carbide Burs x 4



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605 - 0983, Japan (www.shofu.co.jp)
 SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12 The Alpha, Science Park II, Singapore 117684 (www.shofu.com.sg)
 SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO. LTD. No.645 Jiye Road, Sheshan Industry Park Songjiang Shanghai 201602, China (www.shofu.com.cn)
 SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA (www.shofu.com)
 SHOFU DENTAL GmbH Am Rühl 17, 40278 Düsseldorf, Germany (www.shofu.de)