

PEN Bright

LED 光固化灯

极简主义



纯蓝光



操作便捷



个性护目镜



PEN Bright 是操作极简化，重视临床易用性， 全面支持 MiCD 微创美学的 LED 光固化灯


PEN Bright

约 125g 的重量
包含导光棒、护目片


放置方便
护目片的形态精心设计

导光棒
可以高温高压消毒
(135°C、4 分钟)
灭菌处理


★ 搭载 2 个光照强度、3 个照射模式

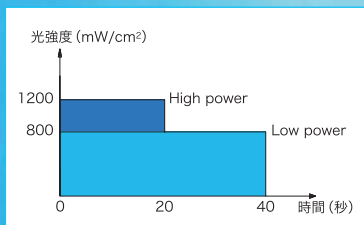

H1、L1 (常亮模式)
需要快速高强度光照的场合最适合的模式

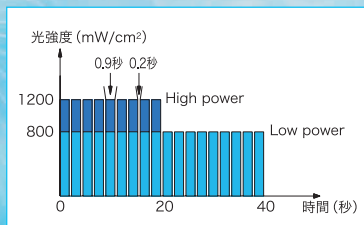

H2、L2 (脉冲模式)
控制发热，以减轻对牙髓刺激的模式

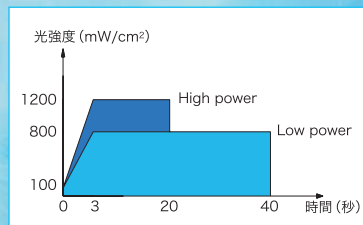

H3、L3 (渐亮模式)
启动时通过功率管理控制聚合收缩的模式

* 照射时间参考为 (厚约 2mm 的 CR 充填用 H1 模式照射) Beautifil II: 10 秒、Beautifil Flow Plus: 10 秒
* 光固化机、灯罩不可灭菌

包装、规格



Pen Bright 1 套

内容: 光固化机 1、导光棒 1、护目片 1
充电底座 1、AC 适配器 1
单品: 光固化机、导光棒、充电底座
护目片、AC 适配器

光固化灯

电 源	锂离子电池 DC3.7V
光 输 出 波 长	430~490nm
光 强	L mode 800mW/cm ² H mode 1200mW/cm ²
尺 寸	W28 X D33 X H182(mm)
重 量	约 90g

电池和光固化机为一体设计，所以电池寿命结束时请购买单品光固化机。

充电底座

电 源	DC5.0V
电 源 输 入	25 VA
尺 寸	W96 X D125 X H80(mm)
重 量	约 210g

导光棒

材 质	玻璃纤维
尺 寸	长 107 x 照射口径 8 (mm)
重 量	约 30g

AC 适配器

电 源	AC 100-240V
输 出	DC 5.0V

* 本式样如有改良，恕不另行通知。

特点

- 恒光功能
- 轻便的无线主机
- 导光棒加长，便于后牙操作
- 短路保护、低电量警示保护功能
- 极低待机功耗，超长待机时间
- 双重过充电保护功能
- 人体工学设计

相关产品



Beautifil II 光固化树脂



Beautifil Flow Plus 注射树脂 F00

欲了解更多松风信息
请扫描下方二维码



贡献于世界齿科医疗的

株式会社 松風

本社: 〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11・日本

松風齿科器材贸易(上海)有限公司: 上海市松江区余山工业区吉业路645号

(201602) 电话: (8621) 57796980 传真: (57796981) E-mail: shanghai@shofu.com.cn

<http://www.shofu.com.cn>